


Seebio® 重组耐碱蛋白A——亲和层析配基理想之选

性能参数	Seebio® 重组蛋白A (rProtein A)	同类产品
IgG功能结合域	4个	4个
* 洗脱PH	4.0 更高的洗脱PH 可降低抗体聚集	2.0
* 耐碱性	0.5M NaOH	0.1M-0.5M NaOH
HPLC纯度	95%-99%	/
还原后纯度	95%	90%-95%
动态载量	30mg人IgG/ml	30mg人IgG/ml 天然
纯化方式	非抗体柱纯化 避免其它IgG污染	/
是否带His	是	是
质量体系	ISO9001质量体系	/

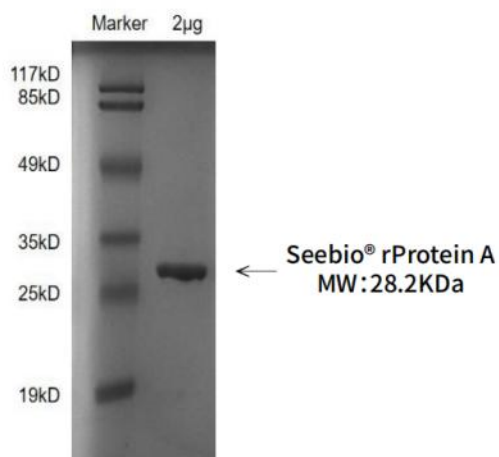

Seebio® rProtein A SDS-PAGE (12%) 电泳检测

订购信息(可定制大包装规格)

货号	中文名称	包装规格
ECL0019H	Seebio® 重组蛋白A (rProtein A) -层析填料专用	1mg、10mg、100mg、1g

应用: C末端含有半胱氨酸, 可定向偶联到固体分离介质上, 用于单克隆抗体或多克隆抗体的纯化。可结合大多数人或小鼠免疫球蛋白子类(如人IgG1、IgG2、IgG4; 小鼠IgG2、IgG2a、IgG2b、IgG3), 还可结合牛、仓鼠、兔的总免疫球蛋白。

用于诊断——Seebio® 重组蛋白A (rProtein A)

货号	中文名称	包装规格
ECL0019G	Seebio® 重组蛋白A (rProtein A)	1mg、10mg、100mg、1g

应用: 可与多种报告分子(荧光染料、酶标记、生物素、胶体金、放射性标记等)偶联而不影响其与抗体结合的活性。偶联后的蛋白A衍生物可用于Western blot、ELISA、免疫组化等的抗体检测。

● 存储条件: 2-8°C ● 不建议冻存 ● 24个月稳定



西宝官微



生物试剂原料网